

Inhalatie-instructie

Dagelijks gebruik




- 1 Houd de inhalator rechtop met de kap gesloten.

Draai de houder in de richting van de rode pijlen op het etiket, totdat deze klikt (een halve draai).




- 2 Open de kap totdat deze helemaal opengeklapt is.
- 3 De inhalator is nu klaar voor gebruik.

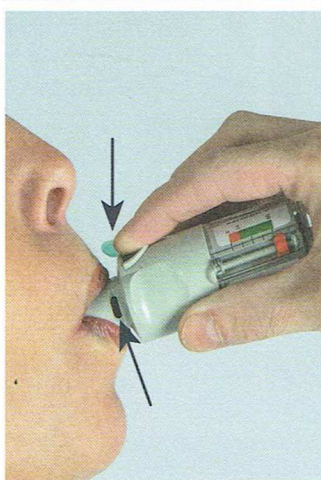

- 1 Adem langzaam en volledig uit, niet in de inhalator.
- 2 Plaats mondstuk tussen de tanden met de lippen eromheen. Zorg dat de luchtgaten vrij blijven.
- 3 Inhaleer met een langzame en diepe teug, druk bij het begin van de inademing op de ontspanner en blijf zo lang als u kunt langzaam inademen.
- 4 Houd de adem 10 tellen vast of zolang als comfortabel is en neem intussen de inhalator uit de mond.
- 5 Adem rustig uit en sluit de kap.
- 6 Herhaal vanaf punt 1 van 'Dagelijks gebruik' voor een tweede inhalatie om een volledige dosering binnen te krijgen.

Inhalatie-instructie


Het gereedmaken van de inhalator voor eerste gebruik

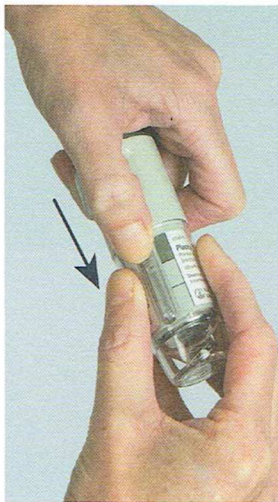

- 1 Houd de kap gesloten, druk op de veiligheidsknop en trek de doorzichtige houder los.



- 2 Neem het patroon uit de verpakking. Duw het smalle uiteinde van het patroon in de inhalator, totdat u weerstand voelt. Plaats de inhalator rechtop op een vlakke stevige ondergrond met 1 hand, zodat de patroon in de inhalator wordt gedrukt.

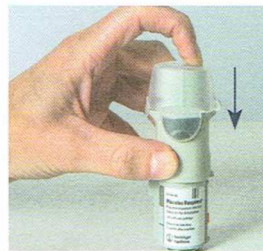

- 3 Verwijder het patroon niet meer als deze eenmaal in de inhalator is geplaatst.



- 4 Schuif de doorzichtige houder op zijn plaats en verwijder deze niet meer.



- 5 Houd de inhalator rechtop met de kap gesloten. Draai de houder in de richting van de rode pijl op het etiket, totdat deze klikt (een halve draai.)



- 6 Open de kap totdat deze helemaal opengeklaapt is.



- 7 Richt de inhalator naar de grond. Druk op de ontspanner en sluit de kap.

- 8 Herhaal de stappen 5 tot 7 totdat er een wolk te zien is. Herhaal deze dan nog drie keer.



- 9 Als de pijl van de dosimeter in het rode gebied van de schaalverdeling terecht komt, is er nog voor ongeveer 7 dagen over. Dit is wanneer u een nieuwe inhalator moet halen. Als de pijl het einde van de schaalverdeling heeft bereikt, is het patroon leeg en blokkeert de inhalator automatisch en moet deze worden weggegooid.

- 9 De inhalator is nu klaar voor dagelijks gebruik.